
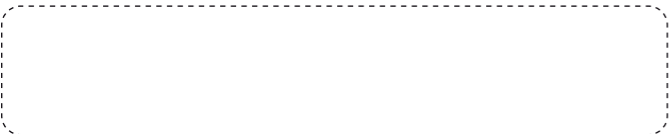


Graphics&Packing Technology Section ICN POLFA RZESZÓW S.A.		ULOTKA PIL		<b>BAUSCH + LOMB</b>	
Nazwa produktu Product Name	Biotrue gel		Kolor nadruku Colours		
			Black		
Kraj Country (ISO)	ES, PT		Nr wykrojnika Spec No	12027	
Opracowane przez Designed by	Zofia Tabisz-Mikosz Zofia.Tabisz-Mikosz@bauschhealth.com phone: +48 17 865 5536		Kod Wytwórcy Manufacturer code	49171PB300/2-ES+	
Nr korekty Proof No	5	Data Date	13.02.2020	Kod farmaceutyczny Pharmacode	111
Kod wersji Valeant version code	P1ESPT02		Inny kod Other code	-	
Rozmiar czcionki Font size	minimum 7 pt		Wymiar ulotki PIL size	270 x 120 mm	
Krój czcionki Font used	Interstate Font Family		Gramatura papieru Paper weight	up to manufacturer	
Komentarze Comments (Reason for the change)					
- PMR_ICN-19-0981-A - manufacturer & packing site: DMP Berlin - Graphic design changes - proof #5 by MF					
Akceptacja Techniczna Technical Approval					
					
Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval					
					

111

**BAUSCH + LOMB**

# Biotrue<sup>®</sup>

## Gel Oftálmico

### **(ES)** Instrucciones de uso

Solución viscosa con dexpanthenol para mejorar la lubricación de la superficie ocular y proteger el ojo sano.

#### Composición

1 tubo de gel de Biotrue<sup>®</sup> Gel Oftálmico contiene 10 g de gel ocular. 1 g de gel ocular contiene 50 mg de dexpanthenol, así como carbómero, edetato disódico, hidróxido sódico, agua y cetrimida como agente conservante.

#### Aplicación de Biotrue<sup>®</sup> Gel Oftálmico

Biotrue<sup>®</sup> Gel Oftálmico produce un efecto refrescante y calmante en los ojos. Mejora la humectación de la superficie ocular en caso de sensación de sequedad, quemazón o cansancio en los ojos, provocada, por ejemplo, por ver la televisión durante mucho tiempo o por trabajar frente a pantallas de ordenador, así como por el aire de los sistemas de calefacción o de aire acondicionado.

Biotrue<sup>®</sup> Gel Oftálmico contiene dexpanthenol para proteger los ojos saludables. El dexpanthenol pertenece al grupo de la



111

P1ESPT02\_49171PB300\_2-ES+\_BiotrueGEL10\_130220\_05.indd 1

111




vitamina B.

#### Seguridad y uso correcto de Biotrue<sup>®</sup> Gel Oftálmico

La ilustración muestra el uso sencillo y fácil del producto.

Mantenga el tubo en posición vertical por encima del ojo y tire con delicadeza del párpado inferior. Instile una gota en cada ojo apretando ligeramente el tubo. Por favor, no olvide mantener el tubo en posición vertical mientras aplica el producto.

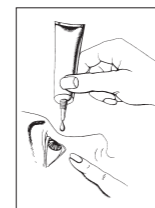

#### Precauciones

No utilizar si el tubo está dañado.

Asegúrese de que la punta del tubo no toca los ojos o los dedos para evitar cualquier posible contaminación del gel. Cierre el tubo con el tapón protector inmediatamente después de su uso.

Una vez abierto, no comparta el tubo con ninguna otra persona.

Si está utilizando más de un tipo de medicación, espere al menos 15 minutos entre la aplicación de las gotas.

Deben quitarse las lentes de contacto antes de usar Biotrue<sup>®</sup> Gel Oftálmico y no deben volver a ponérselas hasta que hayan transcurrido al menos 15 minutos, ya que podría mancharse la superficie de las lentes de contacto.

Este producto puede provocar visión borrosa transitoria debido a la formación de grumos y por consiguiente, los pacientes deben actuar con precaución si conducen vehículos o manejan maquinaria.

Las reacciones de hipersensibilidad se producen muy raramente. En caso de reacción de hipersensibilidad, interrumpa el uso del producto.

En caso de embarazo o lactancia, consulte a su médico antes de utilizar el producto.

#### Conservación

Conserve este producto en un rango de temperaturas comprendido entre +1 °C y +25 °C.

Deseche el producto tras 1 mes y medio desde su apertura.



111

13.02.2020 14:40:08

Graphics&Packing Technology Section ICN POLFA RZESZÓW S.A.		ULOTKA PIL		<b>BAUSCH+LOMB</b>	
Nazwa produktu Product Name	Biotrue gel	Kolor nadruku Colours			
		Black			
Kraj Country (ISO)	ES, PT	Nr wykrojnika Spec No	12027		
Opracowane przez Designed by	Zofia Tabisz-Mikosz Zofia.Tabisz-Mikosz@ bauschhealth.com phone: +48 17 865 5536	Kod Wytwórcy Manufacturer code	49171PB300/2-ES+		
Nr korekty Proof No	5	Data Date	13.02.2020	Kod farmaceutyczny Pharmacode	111
Kod wersji Valeant version code	P1ESPT02		Inny kod Other code	-	
Rozmiar czcionki Font size	minimum 7 pt		Wymiar ulotki PIL size	270 x 120 mm	
Krój czcionki Font used	Interstate Font Family		Gramatura papieru Paper weight	up to manufacturer	
Komentarze Comments (Reason for the change)					
- PMR_ICN-19-0981-A - manufacturer & packing site: DMP Berlin - Graphic design changes - proof #5 by MF					
Akceptacja Techniczna Technical Approval					
Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval					

111



**PT** Instruções de Utilização

Solução viscosa com Dexpantenol para melhorar a lubrificação da superfície ocular e para proteger o olho saudável.

**Composição**

1 bisnaga de Biotrue® Gel Oftálmico contém 10 g de gel oftálmico. 1 g de gel oftálmico contém 50 mg de Dexpantenol, assim como carbómero, edetato dissódico, hidróxido de sódio, água e cetrimida, como agente conservante.

**Utilização de Biotrue® Gel Oftálmico**

Biotrue® Gel Oftálmico tem um efeito refrescante e calmante nos olhos. Melhora a hidratação da superfície ocular quando existe sensação de olho seco, ardor ou cansaço ocular causados, por exemplo, por ver televisão ou trabalhar com ecrãs digitais durante longos períodos de tempo, por ar proveniente de sistemas de aquecimento ou ar condicionado.

Biotrue® Gel Oftálmico contém a substância dexpantenol para proteger os olhos saudáveis. Dexpantenol pertence às vitaminas do complexo B.

**Utilização correta e segura de Biotrue® Gel Oftálmico**

A figura mostra a utilização simples e fácil do produto.



Segure a bisnaga na posição vertical acima do olho e puxe suavemente para baixo a pálpebra inferior.

Aplique uma gota em cada olho, apertando ligeiramente a bisnaga. Por favor, assegure-se de que a bisnaga está na posição vertical enquanto faz a aplicação.



111

111



**CE** 0483



Bausch & Lomb GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Germany

Distribuidor en España: Bausch & Lomb, S.A.-Avda. Valdelaparra, 4-28108 Alcobendas-Madrid-ES

Distribuidor em Portugal: Bausch & Lomb, S.A. - Suc. Portugal, Av. da República, nº 25, 6-A 1050-186 Lisboa, Portugal

**Símbolo**



**Descripción/Descrição**

Deseche el gel no utilizado una vez transcurridas seis semanas (1 mes y medio) desde la primera apertura del envase. Descarte o produto 1 mês e meio após a primeira abertura



No utilice el producto si el envase está dañado. Não utilize se a embalagem estiver danificada

**STERILE A**

Estéril mediante técnicas de procesamiento aséptico  
Esterilizado mediante técnicas de procesamiento asséptico



Límite de temperaturas  
Limite de temperaturas



Consulte las instrucciones de uso  
Consulte as instruções de utilização



Caducidad  
Data de validade



Lote  
Número de Lote



Fabricante

Biotrue® Gel Oftálmico, Rev. 1, 2020-01  
Producto nº/Produto n.º: 300

®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.  
© Bausch & Lomb Incorporated.

49171PB300/2-ES+  
P1ESPT02



111